

Köszönjük, hogy megvásárolta masszázsbetétjeink egyikét.

A masszázsmatrac ergonomikus kialakítással rendelkezik a hát, a derék, a fenék, a lábak stb. masszírozására. Ez egy masszázs-termék többféle masszázs módszerrel és meleg kompressziós funkcióval.

Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és fordítson különös figyelmet a biztonsági óvintézkedésekre a termék helyes működésének és használatának biztosítása érdekében. Vigyázzon a kézikönyvre a későbbi használathoz.

Instrukciók


Csatlakoztassa a termék egyenáramú tápegységének végét az adapter egyenáramú tápcsatlakozójához, dugja be az adapter hálózati csatlakozóját a háztartási aljzatba, és a kézi vezérlő jelzőfénye kigyullad, és a termék bekapcsol.

Nyak beállítása:

1. Nyomja meg az automatikus üzemmód bekapcsolás gombot. Ha másodszor is megnyomja ezt a gombot, az egész gép kikapcsol. Az automatikus üzemmód funkciói a következők: fűtés a gyúrési és masszázsfunkció bekapcsolásához, (1 perc előre forgatás, következő 1 perc hátrafelé forgatás, ciklus felváltva a 15 perces időzített leállítás végéig)
 2. Előre és hátrameneti üzemmód beállítása: Ez alapértelmezés szerint egy perc, amikor a gép be van kapcsolva. Nyomja meg először az előre-forgatás funkció bekapcsolásához, és nyomja meg újra a hátra-forgatás funkció bekapcsolásához.
 3. A gép alapértelmezés szerint három fokozatban működik. Nyomja meg a sebességfokozat beállítási gombot. Első alkalommal alacsony fokozaton kapcsol be. Nyomja meg újra ezt a gombot a nagy sebességfokozatú működéshez; nyomja meg újra a középső sebességfokozatú működés folytatásához
 4. A fűtési funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Nyomja meg a fűtés funkció gombot a fűtés kikapcsolásához; nyomja meg újra ezt a billentyűt a fűtés újbóli bekapcsolásához.
 5. Energiatakarékos kialakítás, nyomja meg az energiatakarékos üzemmódba való belépéshez.
 6. Bekapcsolt állapotban nyomja meg háromszor az intelligens masszázsmód gombot, hogy 3 különböző masszázsmódot élvezhessen; majd nyomja meg a gombot még egyszer az első intelligens masszázsmódra való átváltáshoz, és így tovább.
- **Kapcsolás/időzítés:** válassza a kézi vezérlő kapcsológombját. Nyomja meg egyszer a kapcsolót, majd nyomja meg az időzítőt 10 perc / 20 perc / 30 perc.
 - **Program beállítás:** Válassza ki a kézi vezérlőn lévő mód gombot. 1-9 masszázsmód közül választhat.
 - **Erősség beállítás:** Válassza ki az erősség gombot a kézi vezérlőn, összesen 9 masszázserősség közül választhat.
 - **Sebesség beállítása:** válassza ki a sebesség gombot a kézi vezérlőn, összesen 9 masszázss sebesség közül választhat.
 - **Pozíció beállítása:** válassza ki a kézi vezérlőn lévő pozicionáló gombot. 9 masszázspozíció közül választhat.
 - **Fűtés beállítása:** válassza a kézi vezérlőn a fűtés gombot. 3 változat közül választhat.

Megjegyzés: a nyak külön csatlakoztatható a hálózati adapterhez.

Kézi vezérlő leírása

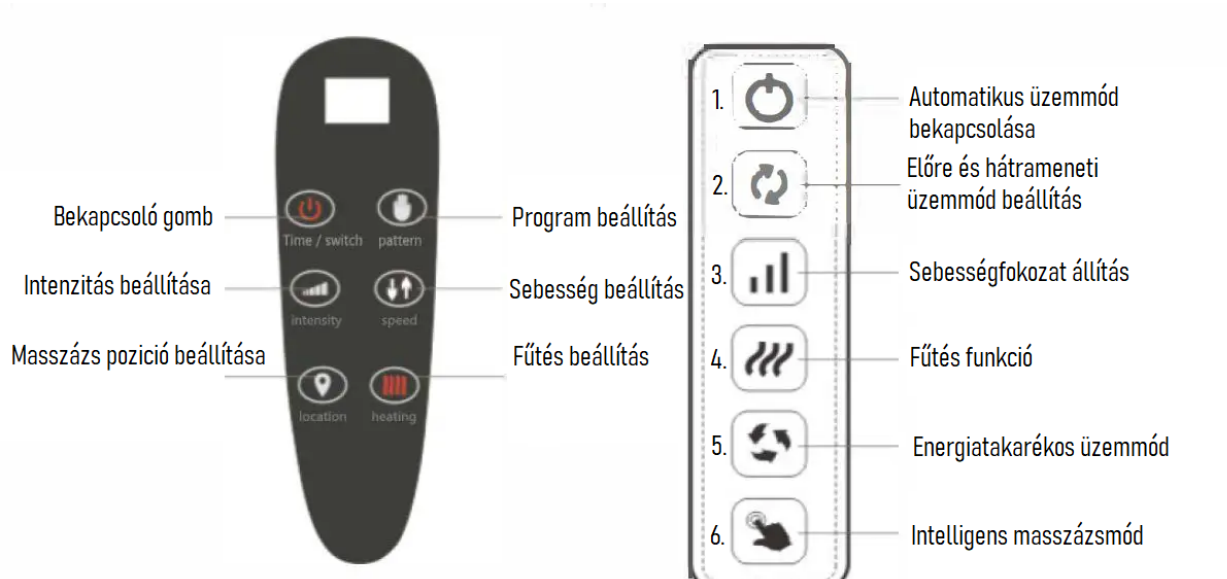

Műszaki paraméterek

Termék neve: Fekvő masszázs betét

Termékmodell: JH-D1

Névleges feszültség: 12V=

Névleges teljesítmény: 24W

Végrehajtói szabványok: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

FIGYELMEZTETÉS: A termékkel kapcsolatos minden szolgáltatást szakembereinknek kell biztosítaniuk. Ha a tápvezeték megsérül, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak vagy annak karbantartó részlegének vagy hasonló főállású személyzetnek kell kicserélni.

TIPP: ez a gép alkalmas adapteres tápellátásra. Ha az adapter megsérült, kérjük, forduljon a vállalat kijelölt alkatrész-karbantartó központjához vagy kereskedőjéhez, hogy az adaptert azonos formátumúval cserélje ki.

Felhasználási környezet

- Kérjük, ne használja a terméket nedves környezetben, például fürdőszobában vagy vízforrás közelében, hogy elkerülje a meghibásodást és akár a személyi biztonságot is veszélyeztesse.
- Ne használja a terméket 40 °C-nál magasabb szobahőmérsékletű környezetben, illetve helyi magas hőmérsékletű környezetben, például elektromos fűtőtest és kályha mellett.
- Ne használja a terméket 5 °C-nál alacsonyabb szobahőmérsékleten, mert a kenőolaj besűrűsödése növelheti a gép fogaskerekeinek és csapágyazott átviteli alkatrészeinek kopását, és befolyásolhatja az élettartamot.
- Ne használja a szabadban vagy poros környezetben, és kerülje a tartós napsütést.
- HA a terméket alacsony hőmérsékletű tárolóhelyről meleg környezetbe szállítják használatra, a belső fém alkatrészek vízgőzöket halmozhatnak fel, ami befolyásolhatja a termék normál működését, vagy akár a gép károsodását is okozhatja.

Javasoljuk, hogy a terméket indítás előtt egy órán keresztül normál szobahőmérsékleten helyezték el.

Biztonsági óvintézkedések

- A termék biztonságos és helyes használatának biztosítása érdekében, kérjük, használat előtt feltétlenül értse meg a kézikönyvben leírtakat.
- Ez a termék csak 220 V -50 Hz-es tápellátáshoz alkalmas.
- Ez a termék nem játék. Kérjük, vigyázzon a gyermekekre, és győződjön meg róla, hogy nem játszanak a termékkel.
- Ezt a terméket nem szabad olyan személyeknek (beleértve a gyermekeket is) használniuk, akik fizikailag nem egészségesek, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élnek, vagy nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli és oktatja őket.
- Ne húzza meg a tápkábelt, és ne használja a tápkábelt a termék felakasztására, hogy elkerülje a vezeték eltörését és az érintkezési hibát. A hálózati csatlakozó kihúzásakor fogja meg a dugót, és húzza ki.
- Ha a termék tápkábele megsérül, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak vagy az általa kijelölt karbantartó egységnek vagy szakszerű karbantartó személyzetnek kell kicserélnie.
- Ne hagyja, hogy a kezelőpanel vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen. Ne kezelje a vezérlő kapcsolót nedves kézzel vagy lábbal,
- Ha a termék felülete sérült (például a szövetborítás vagy a bőr a masszázsfelületén), a személyi sérülések elkerülése érdekében azonnal hagyja abba a használatot.
- Ne merítse a terméket vízbe. Ha véletlenül vízbe kerül, a terméket el kell küldeni javításra, és nem szabad használni!
- Ne helyezzen vagy dugjon tárgyakat a termék bármelyik nyílásába, hogy elkerülje a termék váratlan károsodását. Ha meg akarja szakítani az áramellátást, kapcsoljon ki minden kezelőszervet, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Használat után vagy tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót az aljzatból.
- A termékben magas feszültség van. A terméket saját kezűleg megjavítani tilos, ellenkező esetben személyi sérülés következhet be.
- Ha a gép meghibásodik, azonnal le kell állítani. A gépet használat előtt el kell küldeni a gyártónak vagy az általa kijelölt karbantartó egységnek karbantartásra.

NE HASZNÁLJA A TERMÉKET

Kérjük, konzultáljon orvosával a termék használata előtt.

- Pacemaker vagy hasonló beültethető orvosi eszköz mellett
- Akut betegségekben, például szívbetegségben szenvedő betegek
- Megterheléses hárbetegségben szenvedő, gyenge vagy sérült csontokkal, különösen a gerincoszlopnál
- Műtét után
- Terhesség alatt vagy röviddel szülés után
- Rák, csonttritkulás
- Ha vérkeringési problémái vannak vagy tromboembóliája van
- Bőrfertőzésben szenved
- Rendellenes jelenségek vannak a végtagokban
- Baleset vagy gerincsérülés

- Gyenge és beteges
- Gyermek
- Műtét utáni fizikai kellemetlenségben szenved
- A termék felülete forró, ezért oda kell figyelni, ha hőre nem érzékeny személyek használják.

Hiba és karbantartás

Gyakori hibák	Lehetséges okok	Kezelési módszer
Motor teljes működésképtelensége Teljesítményjelző nem világít	1. Áramkimaradás, hálózati adapter 2. Sérült csatlakozók 3. Nincs bekapcsolva a készülék	Cserélje ki a tápegységet Ellenőrizze a kábelt és csatlakoztassa a dugókat helyesen Dugja be a konnektorba
Masszázs és a görgők lassúak és gyengék Zajos termékműködés	1. Áramkimaradás 2. A maghőmérséklet túl magas (automatikus leállítási védelem)	Várja meg, amíg a hőmérséklet csökken, és indítsa újra a készüléket.
Hangos zaj	Új termék esetén normális	10 óra használati idő után a zaj csökken

Tiszteletben tartjuk az Ön jogait és érdekeit

Cégünk teljes szívvel nyújt Önnek tökéletes értékesítés utáni szolgáltatást.

Kérjük, hogy vásárláskor pontosan töltsse ki ezt a kártyát, és megfelelően őrizze meg.

Jótállási jegyével egy év ingyenes jótállási szolgáltatást élvezhet.

A jótállási idő alatt a cég az anyagköltséget az alábbi körülmények szerint számítja fel, amikor a szervizre van szükség:

1. Az termék nem megfelelő használata és önjavítása
2. Felhasználók, akik nem tartják be a megadott tápfeszültséget
3. A megjelenés a használat miatt természetesen szennyezett
4. Természeti vagy ember okozta katasztrófák által okozott károk

Az alábbi körülmények bármelyike esetén a cég költséget számol fel:

- A jótállási időn túl
- A szervizgarancia bemutatásának elmulasztása esetén
- Ha a tanúsítványban szereplő tartalom (pl. termékmodell s/N) nem egyezik a meglévővel.
- Ha a tanúsítványa tartalma homályos és olvashatatlan, vagy ha a terméket megváltoztatták.

Ez a garancia csak magának a gépnek a szervizgaranciájára vonatkozik. Ha a gépen kívüli tápcsatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva, a biztosíték kiégett, az aljzat nincs jó állapotban, vagy minden típusú áramköri megszakító kiold, a munkadíj felszámításra kerül.